

beurer
beauty

SalonPro System

permanente ontharing



KLINISCH GETESTE IPL-TECHNOLOGIE

Voor maximale veiligheid bij het
privégebruik



hairremoval
SalonPro System

PROFESSIONEEL APPARAAT VOOR PERMANENTE ONTHARING

Veilig, snel en betrouwbaar

ZEER SNELLE TOEPASSING*

Slechts ca. 26 minuten voor het behandelen
van het complete lichaam



IPL permanente ontharing – met het SalonPro System

Eindelijk beschikbaar voor privégebruik:

Het Beurer SalonPro System werkt met de innovatieve, op licht gebaseerde technologie "IPL" (intense Pulsed Light), die reeds in professionele schoonheidssalons en door artsen voor permanente ontharing wordt gebruikt. Deze beproefde en klinisch geteste technologie kunt u met het beurer SalonPro System nu op elk gewenst moment veilig en effectief thuis gebruiken.




ZEER SNELLE TOEPASSING*

Behandeling van het complete lichaam in slechts ca. 26 minuten dankzij het XXL-lichtvlak van 7 cm²

Hoe kan licht haren verwijderen?

Ontharing met licht is gebaseerd op de theorie van selectieve fothermolyse, waarbij optische energie wordt gebruikt om haargroei tegen te gaan. Dit effect wordt bereikt doordat de lichtenergie wordt geabsorbeerd en in warmte wordt omgezet.


Melanine is het pigment van de haarwortel dat het licht opneemt en daarbij de hitte genereert die de haarfollikels diep onder de huid deactiveert en de haargroei tegengaat. Naarmate er meer melanine in het haar aanwezig is (dat wil zeggen, naarmate het haar donkerder is), kan er meer licht worden geabsorbeerd en wordt het haar effectiever verwijderd.

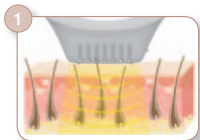

1 Voor het gebruik van het beurer SalonPro System



2 Tijdens een impuls van het beurer SalonPro System

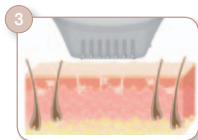


3 Na het gebruik van het beurer SalonPro System

Veelzijdig gebruik – snel en comfortabel

Behandelingen eenvoudig thuis uitvoeren

ca. 0,5 min.

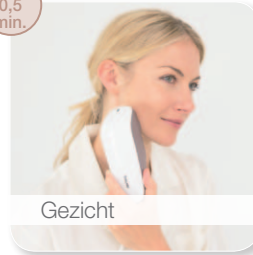


Gezicht

ca. 2 x 0,5 min.



Oksels

ca. 2 x 3,5 min.

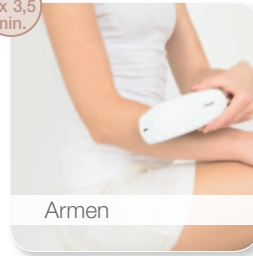

Armen

ca. 1,0 min.




Bikinilijn

ca. 2 x 8,0 min.



Benen

ca. 5,0 min.

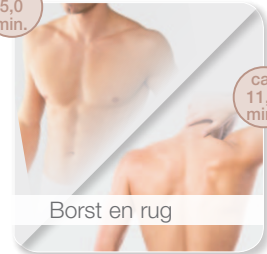

Borst en rug

ca. 11,0 min.

COMFORTABEL
GEBRUIK, ZONDER
ONDERBREKINGEN
dankzij de functie voor "flitsherhaling"




Veilig, snel en permanent – XXL-lichtvlak van 7 cm²

In hoeverre wordt ontharing met licht beïnvloed door de haargroeycyclus?

Elke haar op ons lichaam doorloopt de drie fasen van de haargroeycyclus: de *anagene fase* (groeyfase), de *catagene fase* (overgangsfase) en de *telogene fase* (rustfase).

De duur van een volledige haargroeycyclus verschilt per persoon en is afhankelijk van de plek op het lichaam waar het haar groeit. Over het algemeen duurt de cyclus 18 tot 24 maanden.

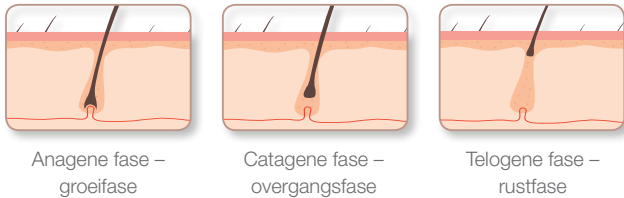

Alleen de haren die zich in de anagene fase bevinden, reageren op de behandeling met het SalonPro System. Houd er dus rekening mee dat er meerdere behandelingen met het beurer IPL SalonPro System nodig zijn om alle haren goed te behandelen. Een volledige behandeling kan door deze omstandigheden alleen worden bereikt door middel van behandelingen gedurende een volledige haargroeycyclus.



Uw professionele apparaten
voor permanente ontharing
Het beurer SalonPro System

Bij Beurer staat veiligheid voorop

Het beurer SalonPro System beschikt over een professioneel afgestemd veiligheidssysteem met geïntegreerde uv-bescherming en de 2-in-1 huidtype- en huidcontactsensor.

Permanente ontharing met IPL is niet geschikt voor een van nature donker gekleurde huid of een erg zongebruinde huid. Onze apparaten hebben een huidtypesensor die voorafgaand aan elke lichtimpuls de huidpigmentatie van het te behandelen huidoppervlak meet en die het gebruik voor uw veiligheid alleen mogelijk maakt bij een geschikte huidpigmentatie.

Tegelijkertijd zorgt de huidcontactsensor er ter bescherming van uw ogen voor dat een lichtimpuls alleen wordt afgegeven als het lichtvlak volledig contact maakt met het huidoppervlak. Door het geïntegreerde uv-filter wordt uw huid bovendien tegen schadelijke straling beschermd.


TECHNOLOGY
clinically
tested

**KLINISCH
GETESTE
TECHNOLOGIE**

Voor maximale veiligheid
bij het privégebruik

Geschikt voor een groot aantal haar- en huidtypen

Het beurer SalonPro System kan bij (van nature) donkerblonde, bruine en zwarte haren en bij een lichte tot middelbruine huidskleur worden gebruikt. Het systeem is niet effectief bij zeer lichte of grijze haren en is niet geschikt voor een zeer donkere huid.

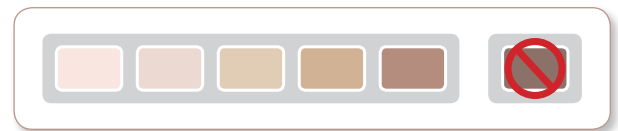

Overzicht van huidtypen en energiestanden

Aan de hand van de tabel voor haar- en huidskleuren kunt u bepalen welke lichtintensiteiten het beste geschikt zijn voor de kleur van uw huid en uw lichaamsbehandeling.


Huid- Haar- kleur	I	II	III	IV	V	VI
Zwart	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Donker- bruin	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Bruin	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Donker- blond	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Licht- blond	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Rood	Energie 4-5-6	Energie 4-5-6	Energie 3-4	Energie 1-2-3	Energie 1-2-3	✗
Grijs/ wit	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Gebruiksperiode van het SalonPro System


Lichaamsbehandeling:

Na 3 tot 4 behandelingen kan al een vermindering van de haargroei van wel 50% worden bereikt. Bij het behandelen van het lichaam behaalt u de beste resultaten als u de eerste 4 behandelingen om de 2 weken en de volgende 3 behandelingen om de 4 weken uitvoert. Daarna herhaalt u de behandeling naar behoefte.

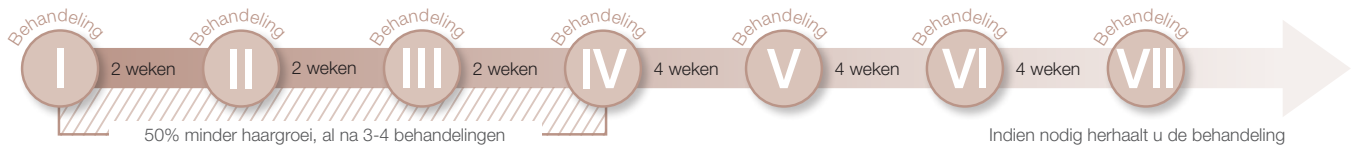

Gezichtsbehandeling:

Bij het behandelen van het gezicht behaalt u de beste resultaten als u de eerste 6 behandelingen om de 2 weken en de volgende behandelingen om de 4 weken uitvoert. Daarna herhaalt u de behandeling naar behoefte.

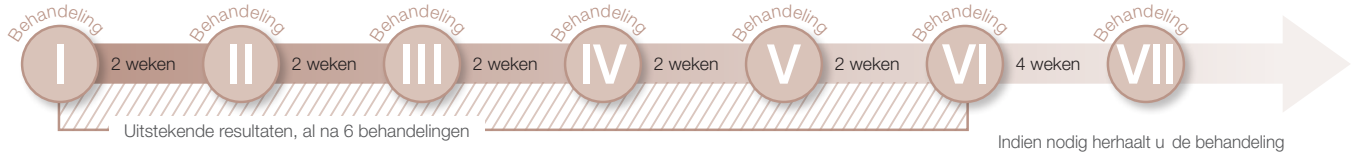

IPL 10000 SALONPRO SYSTEM GEAVANCEERDE VERSIE

Inclusief patroon met 150.000 lichtimpulsen



hairremoval

SalonPro System

- Professioneel apparaat voor veilig en eenvoudig gebruik bij permanente ontharing
- Snel, veilig en betrouwbaar
- Zeer snelle toepassing, slechts ca. 26 minuten voor het gehele lichaam
- XXL-lichtvlak: 7 cm²
- Ultramoderne lichttechnologie welke ook door dermatologen voor professionele ontharing wordt gebruikt
- "Flitsherhalings" functie voor gebruik zonder onderbrekingen
- Maximale veiligheid met de 2-in-1 huidtype- en huidcontactsensor
- Voor gezicht, armen, benen, oksels, bikinilijn, borst en rug
- Lifetime Flashes** – incl. patroon met 150.000 lichtimpulsen
- Geen reserveonderdelen nodig

* Op de hoogste energiestand voor armen, benen, gezicht, oksels en bikinilijn

** Is bij normaal gebruik voldoende voor 20-40 jaar

IPL 9000 SALONPRO SYSTEM DE VEILIGE METHODE

Inclusief patroon met 15.000 lichtimpulsen



hairremoval

SalonPro System

- Professioneel apparaat voor veilig en eenvoudig gebruik bij permanente ontharing
- Snel, veilig en betrouwbaar
- Zeer snelle toepassing, slechts ca. 26 minuten voor het gehele lichaam
- XXL-lichtvlak: 7 cm²
- Ultramoderne lichttechnologie welke ook door dermatologen voor professionele ontharing wordt gebruikt
- "Flitsherhalings" functie voor gebruik zonder onderbrekingen
- Maximale veiligheid met de 2-in-1 huidtype- en huidcontactsensor
- Voor gezicht, armen, benen, oksels, bikinilijn, borst en rug
- Incl. patroon met 15.000 lichtimpulsen
- Reservepatroon verkrijgbaar in de handel of via de beurer klantenservice

Twee uitvoeringen – één kwaliteitsstandaard

Met het **SalonPro System**, dat in twee uitvoeringen **verkrijgbaar is**, is een bezoek aan de schoonheidssalon niet meer nodig. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar bespaart u ook waardevolle tijd.

Ergonomische, gebruiksvriendelijke vorm
voor het thuis uitvoeren van behandelingen

Functie voor “flitsherhaling” voor comfortabel
gebruik zonder onderbrekingen

Verlichte functieweergave van de
energiestanden



Lichtpatroon met een licht-
vlak van 7 cm² en geïnte-
greerde uv-bescherming

Stijlvol en
elegant design

Instelbare lichtintensiteit
met 6 standen



IPL 10000
SalonPro System
150.000 lichtimpulsen



IPL 9000
SalonPro System
15.000 lichtimpulsen